



8 800 500-88-18
www.vital-rays.ru



Т Трация

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

FR-M25
Руководство пользователя



ПРОИЗВЕДЕНО: / PRODUCED:
SHENZHEN FORREST HEALTH EQUIPMENTS CO., LTD
Add: Building 2A, no. 48, 228 Industrial area, Henggang Street,
Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
ПО ЗАКАЗУ: / BY ORDER:
ООО «ВИТАЛ РАЙС» / VITAL RAYS, LLC
350012, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. КРАСНОДАР,
УЛ. КРУГОВАЯ, Д. 26 / 350012, RUSSIAN FEDERATION,
KRASNODAR, KRUGOVAYA STR., 26.

Благодарим Вас за приобретение продукции Vital Rays!

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Массажное кресло «Грация» от компании «Витал Райз» – удобное, функциональное и лаконичное изделие, выполненное в классическом стиле. Оно прекрасно подойдет к интерьеру Вашего дома или офиса.

Данное кресло является складным, поэтому его удобно хранить и транспортировать. Эргономичный дизайн и простота в управлении и использовании массажного кресла «Грация» делают его подходящим для ежедневного применения всеми членами семьи. Высота положения массажных элементов для шеи регулируется, что позволяет адаптировать массажер под рост пользователя.

В спинке кресла встроены массажные элементы, а также опциональный прогрев. Сиденье кресла оборудовано функцией вибрационного массажа.

Кресло «Грация» включает несколько видов массажа, оказывающих комплексное воздействие на шею, спину и область таза.

В правом подлокотнике массажного кресла встроена простая в использовании и понятная панель управления.

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием осмотрите массажное кресло и убедитесь в отсутствии повреждений.

Во избежание возникновения возгорания, получения ожогов или удара электрическим током соблюдайте следующие рекомендации:

1. Не оставляйте кресло, подключенное к электросети, без присмотра. После использования всегда выключайте его из розетки.
2. Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.
3. Используйте аппарат только по назначению, описанному в данном руководстве. Не используйте аксессуары и запчасти других производителей.
4. Не используйте аппарат, если поврежден сетевой провод или другие элементы, а также если аппарат упал или намок. Обратитесь к продавцу или в сервисный центр «Витал Райз».
5. Храните сетевой провод вдали от прямых источников тепла.
6. Не используйте аппарат и обратитесь в сервисный центр, если тканевое покрытие в зоне массажа прорвалось. Берегите его от порезов и не допускайте контакта с острыми предметами.
7. Не просовывайте какие-либо предметы в зазоры массажного кресла во избежание его поломки.
8. Не используйте аппарат на улице.
9. Не допускайте контакта массажера с пожароопасными материалами, газами и жидкостями.
10. Чтобы выключить массажное кресло, сначала нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», а затем вытащите штепсельную вилку из розетки.
11. Не вставляйте на аппарат, используйте его только сидя.
12. Не используйте массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью и высоким атмосферным давлением. Берегите его от попадания прямых солнечных лучей, пыли и загрязнений.
13. Во избежание возникновения поломок берегите прибор от детей и домашних животных.
14. При наличии повышенной термочувствительности с осторожностью используйте прибор, так как он имеет функцию нагрева.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед использованием массажного кресла снимите все украшения и аксессуары (шарфы, галстуки и т.д.), которые попадают в зону массажа.

- Во время массажа следите за своим самочувствием.

По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.

- Не рекомендуется использование прибора:

- во время второй половины срока беременности;
- при наличии кардиостимулятора;
- при лихорадочном состоянии (температуре, ознобе);
- при наличии злокачественных новообразований;
- при гипертонических кризах;
- при остеопорозе 3-4 степени;
- в 6-месячный период после операций, переломов, травм в зоне массажа;
- при наличии ран и прочих повреждений в зоне массажа;
- при наличии металлических конструкций в зоне массажа;
- в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и т.д.


- Будьте внимательны при выборе степени нагрева, следите за своими ощущениями.

- Не используйте прибор во время сна.

- Не снимайте чехол и не разбирайте аппарат самостоятельно.

В случае необходимости обратитесь к продавцу или в официальный сервисный центр «Витал Райз».

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

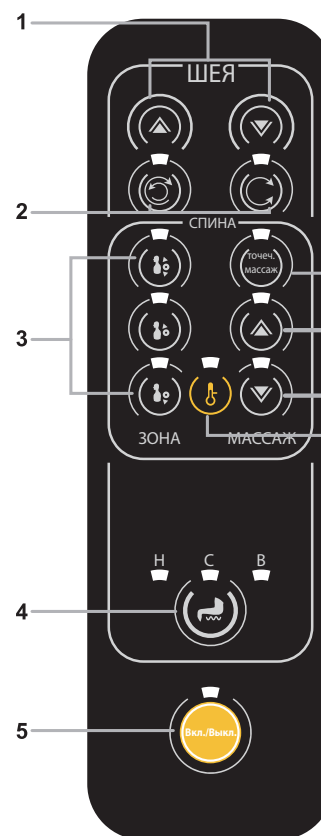

1. Регулировка уровня положения массажных элементов для шеи

2. Выбор направления вращения массажных элементов для шеи:

а) кнопка слева – автоматическое изменение направления

б) кнопка справа – ручное изменение направления

3. Выбор зоны массажа спины: вся спина, верхняя или нижняя часть спины

4. Регулировка интенсивности вибрационного массажа в сиденье кресла – 3 уровня

5. Включение и выключение массажного кресла

6. Точечный массаж – выбор и закрепление определенной области массажа

7. Смещение массажных роликов вверх

8. Смещение массажных роликов вниз

9. Включение и выключение функции нагрева

УСТРОЙСТВО МАССАЖНОГО КРЕСЛА



Отрегулируйте положение спинки кресла, поднимите фиксаторы вверх

Чтобы сложить массажное кресло:



Опустите фиксатор вниз



Сложите массажное кресло



Вид кресла в сложенном состоянии

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не оставляйте аппарат включенным без присмотра.
2. Не накрывайте массажное кресло во время его работы.
3. Не используйте аппарат более 15 минут без остановки.
4. После длительного использования массажное кресло может нагреться, дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
5. Не используйте аппарат на поврежденных участках кожи.
6. При возникновении сильных болевых ощущений и дискомфорта прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь со специалистом.
7. Если вы страдаете серьезными хроническими заболеваниями или проходите курс лечения, перед применением массажного кресла проконсультируйтесь со специалистом.
8. Не используйте массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью и высоким атмосферным давлением.
9. Берегите прибор от попадания прямых солнечных лучей, пыли и загрязнений.
10. Не используйте массажер вблизи раскаленных предметов.
12. Не пользуйтесь массажным креслом, когда у Вас мокрые волосы или тело.
13. Если у Вас длинные волосы, не покрывайте ими зону массажа во избежание их спутывания.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА «ГРАЦИЯ»

1. Плотно соедините сетевой провод, выходящий из массажного кресла, со шнуром адаптера питания.
2. Вставьте штепсельную вилку сетевого провода в розетку с напряжением 220 V / 60 Hz.
3. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» на панели управления.
4. Для выключения массажного кресла нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» повторно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА «ГРАЦИЯ»

1. Чтобы привести массажное кресло в работу, после нажатия кнопки «Вкл./Выкл.» выберите необходимые функции (по отдельности или в сочетании): разминающий массаж шеи, массаж спины – всей поверхности, верхней или нижней части, вибрационный массаж области таза, прогрев.
2. После выбора функций массаж начнется автоматически.
3. Во время работы массажного кресла можно изменять, дополнять и выключать различные функции, а также выбирать конкретную область массажа.
4. После окончания сеанса массажа ролики автоматически вернутся в исходное положение.
5. После использования выключите аппарат соответствующей кнопкой, а также отключите его от электросети.

Примечание: массажное кресло «Грация» оснащено функцией автоматического отключения через 15 минут после начала сеанса.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- * Перед очисткой массажного кресла обязательно отключите его от электросети.
- * Протирайте массажное кресло только сухой мягкой тканевой салфеткой.
- * Храните аппарат в сухом и прохладном месте.
- * Не оставляйте массажер под воздействием прямых солнечных лучей.
- * Самостоятельно не разбирайте массажное кресло для очистки или иных целей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием аппарата внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. Неправильное использование массажера может привести к травмам.

- * Во избежание удара током и поломки аппарата не вскрывайте его самостоятельно.
- * Во избежание удара током или возникновения пожара берегите аппарат от попадания влаги.
- * Используйте массажное кресло только с напряжением, указанным в инструкции.
- * Обратите внимание, что аппарат может нагреваться. Будьте аккуратны при его использовании.



ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Звук трения массажных роликов о спинку кресла. Шум мотора. Звук воздушного потока.	Данные звуки могут присутствовать во время работы аппарата, это не является индикатором неправильной работы массажера.
Массажное кресло не включается.	<p>Проверьте, подключен ли аппарат к электросети.</p> <p>Убедитесь, что штепсельная вилка плотно вставлена в розетку.</p> <p>Проверьте, плотно ли подключен сетевой провод к адаптеру питания.</p> <p>Убедитесь, что в вашей розетке подходящее питание.</p> <p>Убедитесь, что Вы нажали все необходимые кнопки согласно инструкции.</p> <p>Обратите внимание, что после длительной работы аппарату может понадобиться до 30 мин., чтобы остыть (во избежание поломок и перегрева).</p>
Массажные ролики останавливаются во время работы кресла.	Роликовый механизм может останавливаться под излишним давлением. Слегка отклонитесь от спинки кресла и уменьшите силу давления телом на массажные ролики.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Наименование	Складное массажное кресло «Грация»
Модель	FR-M25
Питание AC	100-240 V
Номинально потребляемый ток AC	1.5 A
Частота AC	50-60 Hz
Номинальное напряжение	12 V  5 A
Номинальная потребляемая мощность	60 W
Штекерное соединение DC	

